

# バルーンボタン ガイドワイヤーセット

(クリニー バルーンボタン)

医療機器認証番号 225ACBZX00005000


ISO 80369-3 対応

半固形栄養剤の投与がしやすい  
ボラスショートタイプの接続チューブが  
付属されたバルーンボタンセット

## ● 半固形栄養剤が注入しやすい接続チューブ

ボラス投与タイプとボラスショートタイプは、チューブ内腔をより広くした設計です。また、ボラスショートタイプの半固形栄養剤の注入抵抗はボラス投与タイプの約半分です。

※粘度 15,000~20,000Pa・s を使用した当社実験による

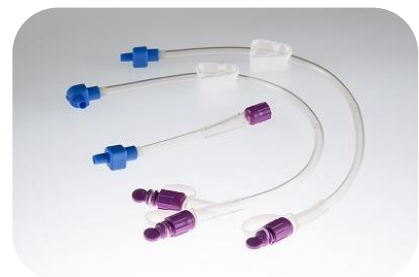

## ● 腹腔内誤挿入のリスクを低減させるガイドワイヤー

カテーテル交換の際、腹腔内への誤挿入のリスクを低減させるために、コシのある 0.052” のガイドワイヤーをセットしました。カテーテルへの追従性と胃内への穿刺リスク等を考慮した、先端柔軟性に優れたガイドワイヤーです。

## ■ 規 格

品目コード	サイズ呼称	有効長	規定容量	JANコード
800 001 6268	14Fr	L-20	5m L	4542187219319
800 001 6269		L-25		4542187219326
800 001 6270		L-30		4542187219333
800 001 6271		L-35		4542187219340
800 001 6272		L-40		4542187219357
800 001 6273		L-45		4542187219364
800 001 6274	16Fr	L-20	5m L	4542187219371
800 001 6275		L-25		4542187219388
800 001 6276		L-30		4542187219395
800 001 6277		L-35		4542187219401
800 001 6278		L-40		4542187219418
800 001 6279		L-45		4542187219425
800 001 6280	18Fr	L-20	10m L	4542187219432
800 001 6281		L-25		4542187219449
800 001 6282		L-30		4542187219456
800 001 6283		L-35		4542187219463
800 001 6284		L-40		4542187219470
800 001 6285		L-45		4542187219487
800 001 6286	20Fr	L-20	10m L	4542187219494
800 001 6287		L-25		4542187219500
800 001 6288		L-30		4542187219517
800 001 6289		L-35		4542187219524
800 001 6290		L-40		4542187219531
800 001 6291		L-45		4542187219548
800 001 6292	22Fr	L-20	10m L	4542187219555
800 001 6293		L-25		4542187219562
800 001 6294		L-30		4542187219579
800 001 6295		L-35		4542187219586
800 001 6296		L-40		4542187219593
800 001 6297		L-45		4542187219609
800 001 6298	24Fr	L-20	10m L	4542187219616
800 001 6299		L-25		4542187219623
800 001 6300		L-30		4542187219630
800 001 6301		L-35		4542187219647
800 001 6302		L-40		4542187219654
800 001 6303		L-45		4542187219661

1セット/箱・滅菌済

- カテーテル仕様：X線造影ライン入り, 先端開孔
- ガイドワイヤー仕様：外径/1.32mm(0.052") 全長/600mm 固定式ストレート(先端軟化型)
- バルーン拡張器
- 接続チューブ (ポラス投与タイプ, 持続投与タイプ, ポラスショートタイプ)

## ■ クリニー 接続チューブ

品目コード	製品タイプ	コネクタ形状	有効長	JANコード
800 001 6409	ポラス投与	たて型	300mm	4542187220742
800 001 6410	持続投与	よこ型	300mm	4542187220759
800 001 6411	ポラスショート	たて型	50mm	4542187220766

1本/箱・滅菌済

□弊社では常に研究開発をおこなっておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。  
 □ご使用にあたっては必ず電子添文をご一読ください。



クリエートメディック株式会社

ホームページ <https://www.createmedic.co.jp>