

三管分離逆止弁付直腸カテーテル（Yチューブ）

ショートタイプ

使用目的

注腸検査

保 険

材料費：請求可


分野名：017 3管分離逆止弁付バルーン
直腸カテーテル

償還価格：1,160 円

特長と利点

1. 有効長を260mmとショート化したことによる、操作性の向上
2. 先端部側孔を4個としたことによる、先端部柔軟性・バリウム吸引力の向上、及び、腸壁吸引リスクの低減

規 格

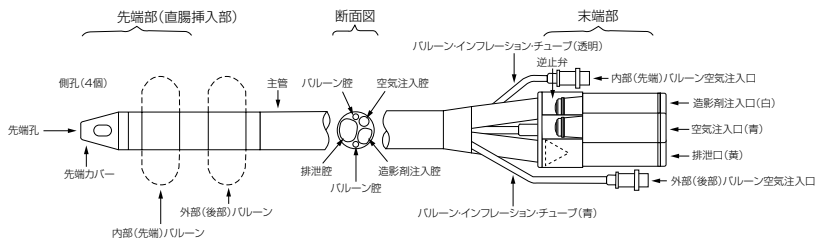

* 本品は、造影剤注入管、排泄管および空気注入管を一本のカテーテル内で三管に完全に分離するとともに、注入・排泄の方向に応じた逆止弁を設けてあります。

ショートタイプ

品目コード	製品名称	有効長	側孔
800 000 6233	三管分離逆止弁付直腸カテーテル（Yチューブ） （ショートタイプ）	260mm	4個
800 000 6785	三管分離逆止弁付直腸カテーテル（Yチューブ） （ショートタイプ Yコネ入）	260mm	4個

包装：10本/箱、10箱/カートン・未滅菌