

クリニー採尿バッグ

low floor

# クリニー採尿バッグ (ローフロアー)



## 低床ベッドでの使い易さを更に追求したクリニーの新しい採尿バッグ


Point  
1

当社従来品よりも天地幅が短く、低床ベッドでも使用しやすい設計になっています。




Point  
2

排尿口先端が床に接触しにくく、片手でも容易に排尿ができる仕様となっています。

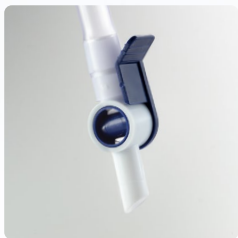

### コックハンドル式 排尿口

開閉操作が片手で容易に行えます。

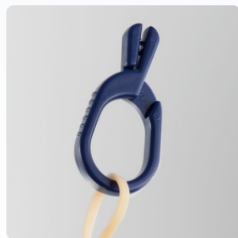

### ベッドシート クリップ

インレットチューブのたるみを防止し、スムーズな排尿が可能です。



### ニードルレス サンプルポート

金属針を使用せず、標準シリンジにて新鮮尿の採取が可能なので、針刺し事故を予防できます。

品目コード	800 001 3329
容量	2000mL
JANコード	4542187189964
内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体サイズ 縦約205mm / 横約340mm(コック収納時)</li> <li>・ニードルレスサンプルポート付</li> <li>・インレットチューブ 長さ1200mm</li> <li>・ドリップチャンバー 逆流防止弁無し</li> <li>・固定具 固定用ベルト、フック</li> <li>・滅菌 エチレンオキシドガス (EOG) 滅菌</li> </ul>
包装	10枚 / 箱

医療用雑品