

ティアレ 細径フォーリーカテーテル

膀胱留置用カテーテル

動物用医療機器届出番号：28 動薬第 2048 号

“超小型犬” 向けに開発。

技術を結集し “4.5Fr” シリコン製バルーンカテーテルを実現。



○特長

- 超小型犬にもスムーズに挿入出来るサイズ
- Ni-Ti 製 親水性スタイレット付
- 3 通りの使い方ができるマルチキャップ付

“Tierrett”「ティアレ」は、病気に苦しむ動物達を助けたいとの思いから、ドイツ語の“Tierrettung”（動物救護）をモチーフにした、クリエートメディックの動物医療向け製品のブランド名です。




ティアレ 細径フォーリーカテーテル

特長①

○挿入性と抜去性を両立させる

適度なコシの**親水性スタイレット（Ni-Ti 芯線）**付き

- 超弾性の性質をもつ Ni-Ti（ニッケルチタン合金）を芯線に採用し
高い挿入性を持たせています。また、外面の親水性コートが
スタイレットの抜去をスムーズにします。

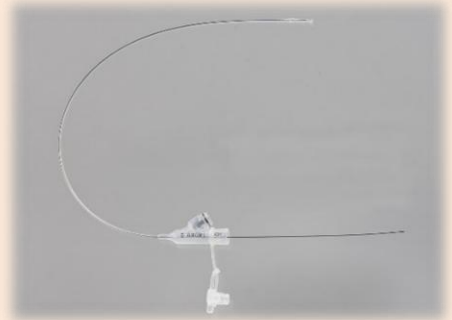

特長②

○変換プラグ不要

カテーテルチップ、ルアーチップ、
止め栓と 3 つの使い方が出来ます。



特長③

○邪魔にならない**軽量・コンパクトな接続部**

○埋込バルブ部

バルブが皮膚に直接触れない設計でスキントラブルのリスクを軽減



特長④

○材質は、からだに優しい **シリコーン製**

尿道粘膜へ低刺激、尿成分の付着も低減

製品規格

サイズ 呼称	外 径	バルーン 容量	有効長	品目コード	JAN コード
4.5 F r	1.5mm	0.8mL	300mm	800-001-4702	4542187203738
			550mm	800-001-4703	4542187203745
5 F r	1.7mm	0.8mL	300mm	800-001-4704	4542187203752
			550mm	800-001-4705	4542187203769

5 本/箱 ・EOG 滅菌済

□弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。

□ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。



クリエートメディック株式会社

<https://www.createmedic.co.jp>

【お問い合わせ先】 動物事業室

東日本
西日本

TEL: (029)243-9411
TEL: (080)4943-3925
FAX: (029)387-2662

E-mail: oem-infoch@createmedic.co.jp

