

シンプルな構造で
“トラブルを防ぐ”
をコンセプトに開発

New!!

ティアレ 尿管バイパスチューブ

動物用医療機器届出番号：元動薬第447号

本品は、腎臓及び膀胱に留置し、
尿管の排尿機能を補助するチューブです。

製品仕様

サイズ呼称	先端長	有効長	外径	内径	先端側孔	品目コード	JANコード
10Fr	25mm	500mm	3.3mm	2.1mm	3穴	800-001-6480	4542187221459


1本／箱・EOG滅菌済

製品特長

〈尿路を安全に確保し続ける5つの工夫〉


- ①腎盂挿入部は予め曲げ加工を施したL字型で、折れ曲がりによる内腔閉塞を予防します。
- ②ループ形状が体動を吸収し、腎盂、膀胱の縫合部など局所への負荷を軽減、チューブ脱落を予防します。
- ③太いチューブ（内径 2.1mm）で、つまりを予防します。
- ④接合部がない構造で、尿が滞留する部分がありません。
- ⑤体外からのアクセスが無いため感染のリスクが少ない仕様です。

本体チューブ（ポリウレタン製）

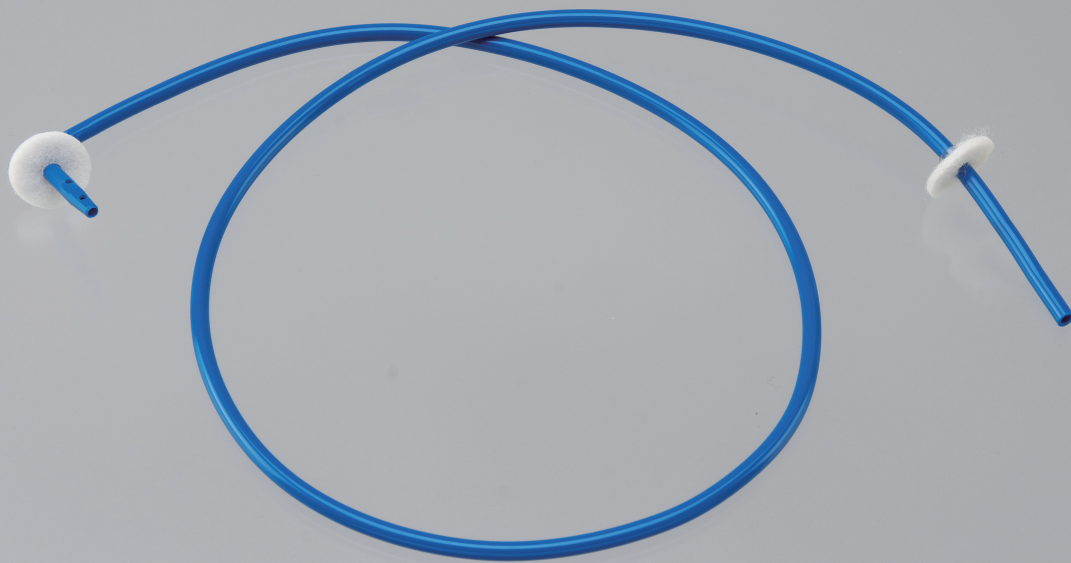

固定板 2 枚

（固定には医療用瞬間接着剤を
ご使用ください。）

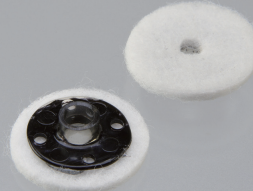

保護シート

（固定板の折れを予防するシートです。
ご使用せずに廃棄してください。）



フリエートメディック株式会社

<https://www.createmedic.co.jp>

【お問い合わせ先】 動物医療事業課 北海道
水戸

TEL(0126)51-1104 FAX(0126)51-1105

TEL(029)243-9411 FAX(029)244-2070

E-mail : oem-infoch@createmedic.co.jp



【本 社】

横浜市都筑区茅ヶ崎南 2-5-25

管理 No.01-0447-20200115