

クリニー

ディスポーザブル穿刺針


医療機器承認番号 20100BZZ00004000

スポットニードル


スポットニードル



スタイレット

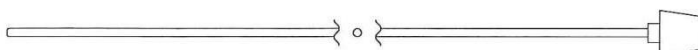

固定針

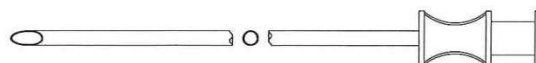

エクステンションチューブ



特長と利点

●目的部位への注入が容易な側孔

先端部には、4方向に側孔があり、放射状に注入されるため目的部位全体に薬液を局注することができます。

●直進性の高い先端形状

独自の三角刃形状により直進性に優れており、肝などの表面を確実にとらえ、目的部位への挿入が容易です。

●明瞭な針先端像

超音波画像で針先端部を明瞭に確認することができます。

●つまりを防ぐスタイレット付き

注入孔からの異物の侵入を防ぐスタイレットは側孔のつまりを防ぎ全側孔からの局注が可能です。

●目盛り入り

先端 2cm より 19cm 迄 1cm 間隔で目盛り付き (5cm 間隔で太線入り) です。容易に深度が確認できます。

●エクステンションチューブ (チューブ長: 400mm) 付き

薬液を注入する事ができます。

規 格

品目コード	サイズ呼称	先端形状	側孔	固定針 外径(有効長)	JANコード
003 401 0100	21G S-10		先端から10mm 6穴	1.06mm (L: 75mm)	4542187006995

有効長: 穿刺針200mm 包装: 5セット/箱・滅菌済

・弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。

・ご使用にあたっては必ず電子添文をご一読ください。



クリエートメディック株式会社

ホームページ <https://www.createmedic.co.jp>