

# 動脈血栓除去用カテーテル

医療機器認証番号 303AIBZX00016000



*Arterial Embolectomy Catheter*

# 動脈血栓除去用カテーテル

## 特長と利点

### 1. 十分な強度を持ったバルーン

- ・血栓除去に必要な強度を保つようバルーンは、均一对称、肉厚に設計しています。
- ・内圧を高め設定していますので、血栓除去中のバルーンのすり抜けを防止します。

### 2. 見やすいデプスマーク


- ・デプスマークは全サイズ 10cm 毎に両面にマークされていますので確認が容易です。

### 3. 専用スタイレット


- ・手技を簡便に行えるようスタイレットに注入口を設けましたので、スタイレット挿入時もバルーン拡張が可能となり、カテーテルのコシの強さを選択することができます。

### 4. 操作性を向上させたコネクター

- ・ウイングコネクターによりカテーテルの操作が行い易く、シリンジの操作が容易になりました。
- ・ウイングコネクター部分には、フレンチサイズが刻印されています。

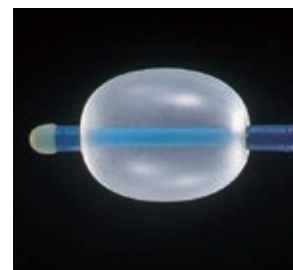

4Fr, 5Fr バルーン部

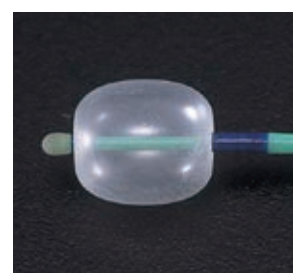

3Fr バルーン部

## 規 格

品目コード	サイズ呼称		外径 [mm]	有効長 [mm]	最大液体注入量 [mL]	最大気体注入量 [mL]	バルーン最大拡張径 [mm]	JAN コード
800 001 6865	3Fr	L400mm	1.0	439	0.3	0.8	7	4542187225303
800 001 6866		L600mm		639				4542187225310
800 001 6867	4Fr	L400mm	1.4	441	0.5	1.6	9	4542187225327
800 001 6868		L600mm		641				4542187225334
800 001 6869		L800mm		828				4542187225341
800 001 6870	5Fr	L400mm	1.7	443	1.0	3.0	11	4542187225358
800 001 6871		L800mm		830				4542187225365

※液体…ヘパリン加生理食塩液を使用して下さい。

※気体…炭酸ガスを使用して下さい。

包装：2本/箱・滅菌済

- 当社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品の仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。
- ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。