
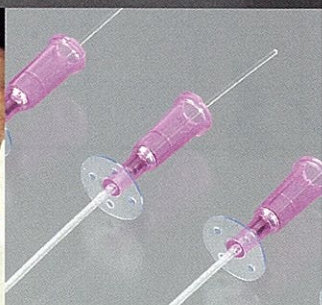
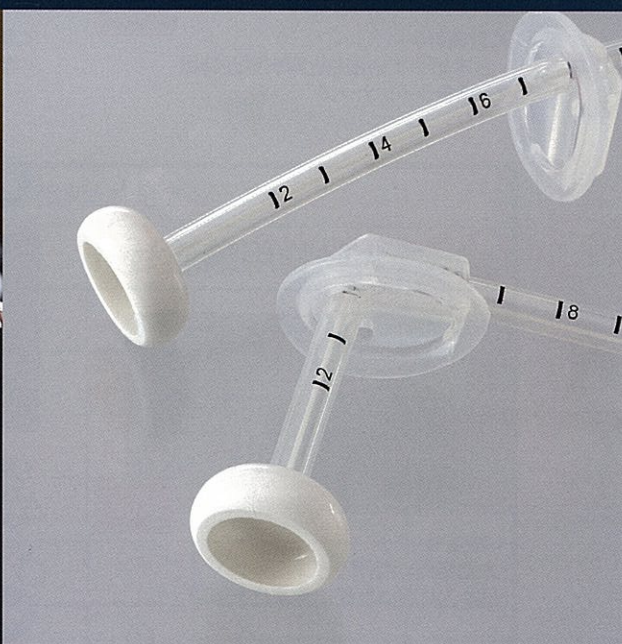


CATHETER CATALOG

Tierrett

「ティアレ」カテーテル総合カタログ


第2版

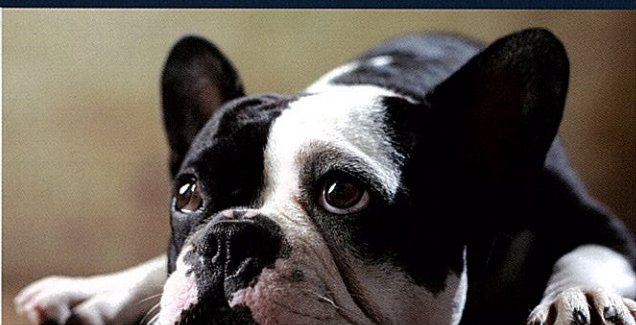

CREATE MEDIC CO.,LTD.

CONTENTS

PEGキット

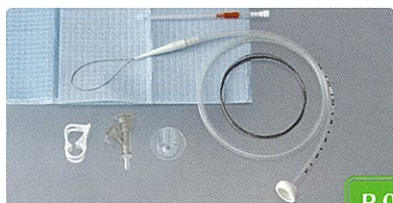

P.03

- <胃瘻造設キット>
・充実のキットでお求めやすい価格


猫カテーテル



P.07

- <導尿カテーテル>
・縫合固定しないタイプ

猫カテーテル (固定板付)

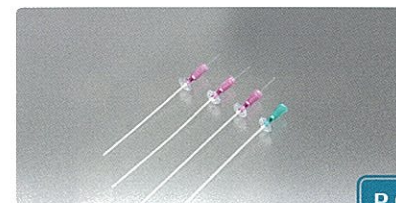

P.08

- <導尿カテーテル>
・ソフト&フラットな固定板が猫にやさしい


動物用留置針



P.05

- <留置針>
・お求めやすい価格と穿刺性の特徴
・26Gをラインナップ


ウロステント

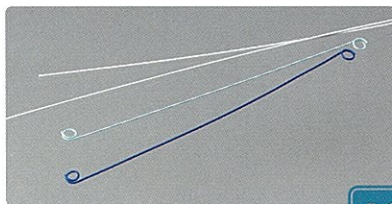

P.09

- <尿管ステントチューブ>
・症例に合わせて選べる8タイプ


ガイドワイヤー

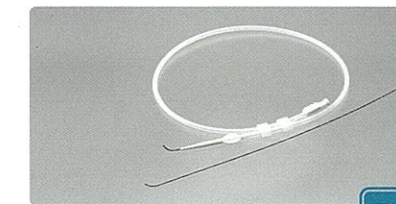

P.10

- <親水性ガイドワイヤー>
・柔軟で押し込み特性に優れたNi-Ti芯線採用


大動物用輸液セット

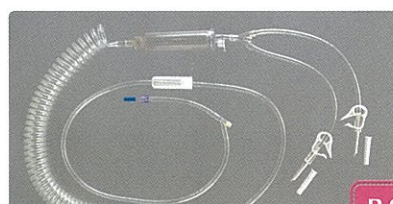

P.06

- <輸液セット>
・大動物向け輸液ライン
・日本人に合った使いやすさを追求

フォーリー

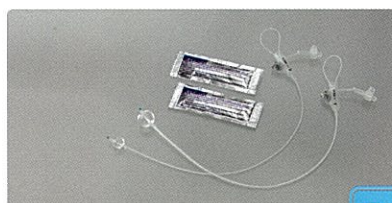

P.11

- <膀胱留置カテーテル>
・よく使うから使いやすさだけではなく、経済性にもこだわったカテーテル
・2つの付属品でも価格添え置き（当社比）


細径フォーリー



P.12


- <膀胱留置カテーテル>
・超小型犬向けバルーンカテーテル

ロングフォーリー

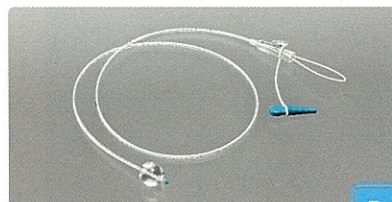

P.13

- <膀胱留置カテーテル>
・十分なチューブ長さのバルーンカテーテル

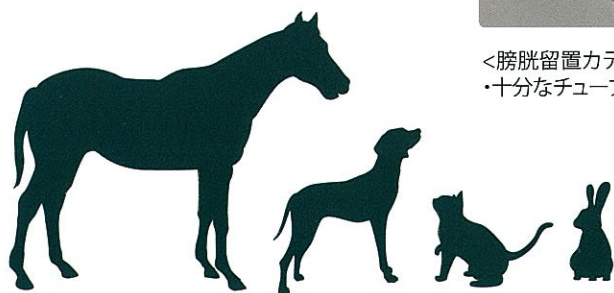

■適用表 / 猫カテーテル適用表

	サイズ		性別・体重			用途	特徴	
			オス	メス 4kg以上	メス 4kg未満			
猫カテーテル	ストレート	3Fr	120mm	—————→		導尿、 フラッシング	フラッシング 専用で安価です	柔軟でコシのある ポリウレタン 製で尿道損傷 のリスクを軽減 します。膀胱内 で結ばれませ ん。
		4Fr	120mm	—————→				
	ビックテール	3Fr	120mm	—————→		導尿、留置	体表で固定しない ので有効長使い 分け不要です	
		4Fr	120mm	—————→				
猫カテーテル (固定板付)	先端開口	3Fr	120mm	100mm	80mm	導尿、フラッシング 留置	フラッシングから 留置まで 一本でOKです	
		4Fr	120mm	100mm	80mm			
	先端封止	3Fr	120mm	100mm	80mm	導尿、留置	スタイレットで高い 挿入性を確保 しています	
		4Fr	120mm	100mm	80mm			

■適用表 / フォーリーカテーテル適用表

	サイズ	有効長	犬の性別と大きさ							
			超小型犬		小型犬		中型犬		大型犬/超大型犬	
			メス	オス	メス	オス	メス	オス	メス	オス
細径フォーリー カテーテル	4.5Fr	L300	○	△						
		L550		○						
	5Fr	L300	△		○	△				
		L550		△		○				
フォーリー カテーテル	6Fr	L300			△		○	△		
	8Fr	L300					△		○	
ロングフォーリー カテーテル	6Fr	L650				△		○		△
		L750						△		○
		L850								○
	8Fr	L650							△	○
		L750								○
		L850								○



ティアレPEGキット



バンパー

シリコーン

動物用医療機器届出番号:29動薬第316号

“充実のキット”を“お求めやすい価格”で。



Tierre†† PEGキットの特長をご紹介します

事故(自己)抜去に強いバンパータイプ

バンパータイプは事故(自己)抜去の危険性が大幅に低減されます

特長
1



給餌が確認しやすい透明なチューブ

透明なチューブで、内腔の給餌残りが容易に確認できます

特長
2



専用固定板

専用固定板に曲げて固定するので、抜け辛く邪魔になりません

特長
3



■材質は、からだに優しいシリコーン製

尿道粘膜への刺激が少なく、尿成分の付着が低減されます

LINE UP <サイズ構成>

サイズ呼称	外径	内径	有効長	バンパー径	品目コード	JANコード
20Fr	6.7mm	4.2mm	700mm	25mm	800-001-5028	4542187206807


キット構成

- | | |
|---------------------------|-----------|
| ① PEGバンパーカテーテル | ⑤ ループワイヤー |
| ② 専用固定板 | ⑥ クランプ |
| ③ 接続2ポートアダプター | ⑦ ドレープ |
| ④ 内針付きイントロデューサーカニューラ(14G) | |


1本/箱・EOG滅菌済




ティアレPEGキットの使用方法について

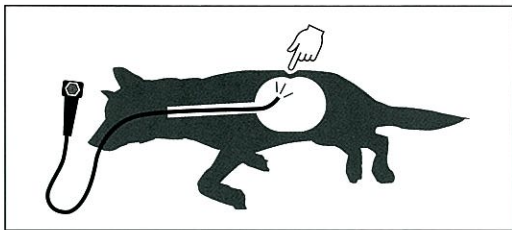


- ・内視鏡を定められた操作方法に従って胃内に挿入する。
- ・送気により胃を十分に膨らませ、腹壁を照射した透過光が最も強い部分の皮膚を圧迫し、胃内腔の隆起を内視鏡で確認することで、適切な胃瘻造設部位を決定する。

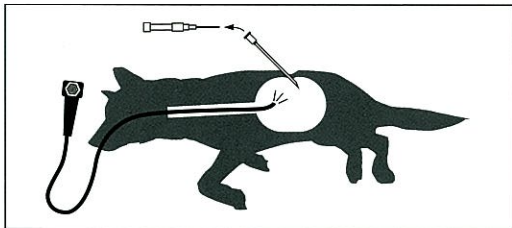



- ・選定した刺入部位周辺を剃毛、消毒し滅菌ドレープで覆う。
- ・内視鏡のチャンネルを通じてスネアーを挿入し、胃内で待機する。
- ・小切開メスで、適切な位置を皮膚切開する。(少なくとも1cm切開)
- ・皮膚切開部位から内針付イントロデューサーカニューラを刺入し、胃内への到達を内視鏡で確認した後、穿刺針を抜去する。

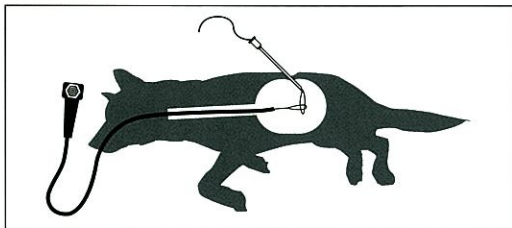


- ・穿刺カニューラからループワイヤーのループ部分を胃内に挿入し、スネアーでループワイヤーをしっかり把持したまま、内視鏡と共に口腔外に引き出す。

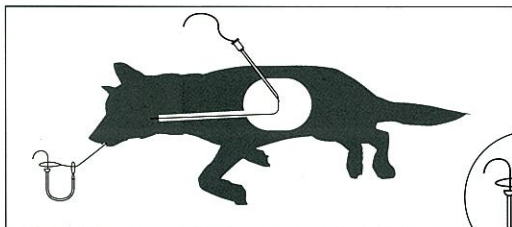

- ・ループワイヤーを十分に引き出したらスネアーを外し、カテーテルの先端ワイヤーとループワイヤーを連結する。
(重要:右図のように、引き出したループワイヤーをカテーテル先端ワイヤーのループ内に通し連結して下さい。)

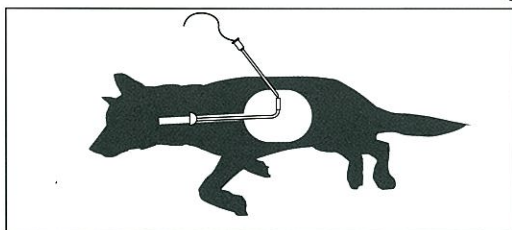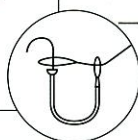

- ・カテーテルに潤滑剤を塗布した後、切開部位から出ているループワイヤーを把持し、ゆっくりと引っ張ることでカテーテルを口腔内に引き入れ、切開部位を通り、穿刺カニューラと共に体外に引き出す。

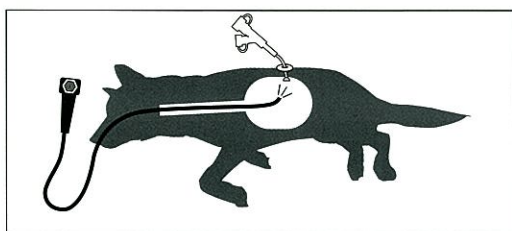

- ・カテーテルのバンパーが胃前壁に軽く接触したら、内視鏡を再び挿入し、正しく留置していることを確認する。
- ・固定板をカテーテルの先端から通し、切開部位で固定する。
- ・栄養補給に適した長さを残し、カテーテルを垂直に切断する。
- ・切り口に2ポートアダプターを取り付ける。

【抜去方法について】

- ・固定板を取り外し、腹部からスライドする。内視鏡を定められた操作方法に従って胃内に挿入する。
- ・送気してバンパーを把持出来るか確認する。瘻孔に潤滑剤を塗布し、カテーテルをゆっくり回し胃内に1~2cmほど押し込む。
- ・スネアーを挿入しバンパーを把持する。体表上の皮膚に近い場所でカテーテルを切り離し、内視鏡と共に口腔外へ引き出す。



ティアレ動物用留置針

FEPフッ素樹脂

動物用医療機器届出番号:29動薬第3022号

穿刺性にこだわった留置針をお求めやすい価格で
エキゾチックアニマルに使いやすい26Gをラインナップ



Tierrett 動物用留置針の特長をご紹介

穿刺性へのこだわり

切れ味の良い内針を採用すると共に外套カテーテルとの段差を抑えることで穿刺性を高めています

特長
1

エキゾチックアニマルに使いやすい26Gをラインナップ

特長
2



マイナーサイズは、無駄のない一箱25本入り

特長
3



LINE UP 〈サイズ構成〉

サイズ呼称	カテーテルゲージ	カラーコード	カテーテル長さ	品目コード	JANコード	包装
14G×48mm	14G (1 7/8")	オレンジ	48mm	800-001-5429	4542187210873	25本入り/箱
16G×48mm	16G (1 7/8")	グレー	48mm	800-001-5430	4542187210880	
18G×32mm	18G (1 1/4")	グリーン	32mm	800-001-5431	4542187210897	
18G×48mm	18G (1 7/8")	グリーン	48mm	800-001-5432	4542187210903	50本入り/箱
20G×25mm	20G (1")	ピンク	25mm	800-001-5433	4542187210910	
20G×32mm	20G (1 1/4")	ピンク	32mm	800-001-5434	4542187210927	
22G×25mm	22G (1")	ブルー	25mm	800-001-5435	4542187210934	
24G×19mm	24G (3/4")	イエロー	19mm	800-001-5436	4542187210941	25本入り/箱
26G×19mm	26G (3/4")	パープル	19mm	800-001-5437	4542187210958	

EOG滅菌済



ティアレ大動物用輸液セット

動物用医療機器届出番号:29動薬第508号

“大型動物向けの、大量輸液が可能な輸液ラインが登場”

伸縮性のあるコイルチューブは、患畜の一定の動きにも対応し、持続点滴を可能に



IV SET



Tierrett 大動物用輸液セットの特長をご紹介

伸縮性のあるコイルチューブ

ポリウレタン製のコイルチューブは、最伸長時には3.5mとなり、患畜の一定の動きにも対応します


特長
1



大流量が可能な太径チューブ

短時間で多くの輸液を可能にする太径(内径4.0mm)のチューブを採用しました

特長
2

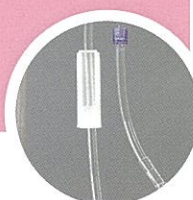

安心の国内工場生産品

国内工場での生産・販売により、輸入品に比べ購入にかかわる手続きなど手間が少なくスムーズにご使用いただけます

特長
3

■日本人に合った使いやすさを追求。獣医師の先生へ取材を通し、細かな使い勝手を改善しています

LINE UP <サイズ構成>

落下方式	公称滴数	主な仕様	
自然落下式	1 ml ≒ 20滴	コイルチューブ長さ	収縮時:280mm / 伸長時:3500mm
		導管チューブ長さ	1000mm(含む、混注ポート)
		チューブ径	コイルチューブ:内径4.0mm 導管チューブ:内径4.0mm
		付属品	保護キャップ(スパイク針、ルアーコネクタ) 固定用タイラップ ※本品に静脈留置針等は付属していません。

品目コード

800-001-5064

JANコード

4542187207163



Tierrett

猫カテーテル

ピッグテール

ウレタン

動物用医療機器届出番号:28動薬第1910号

"簡単に抜けない"をコンセプトに開発したピッグテールタイプとお求めやすい価格で"フラッシングに最適な"ストレートタイプ

- チューブは柔軟なポリウレタン製
- シリンジとしっかり接続できるコネクターを採用




CATHETER



Tierrett 猫カテーテルの特長をご紹介

ピッグテールタイプ

縫合・固定が不要な抜けにくいカテーテル
側穴3穴(楕円1穴、丸2穴)ループ径は約10mm

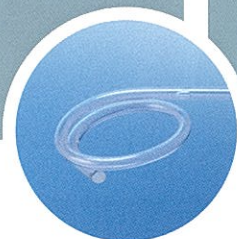特長
1

ストレートタイプ

フラッシング用にお求めやすい価格の
カテーテル先端開口タイプ

特長
2

ルアーコネクター採用で
シリンジとの接続が容易です

特長
3

■チューブは柔軟でコシがあるポリウレタン製

LINE UP 〈サイズ構成〉

製品タイプ	サイズ呼称	外径	有効長	品目コード	JANコード
ストレート	3Fr	1.10mm	120mm	800-001-3516	4542187191844
	4Fr	1.33mm		800-001-3518	4542187191868
ピッグテール	3Fr	1.10mm	120mm (ピッグテール 伸長時 160mm)	800-001-3517	4542187191851
	4Fr	1.33mm		800-001-3519	4542187191875

5本/箱・EOG滅菌済



Tierrett

猫カテーテル(固定板付)

固定板付


ウレタン

動物用医療機器届出番号:28動薬第1210号

個体差と症例で選べる豊富なラインナップ12種類

- やわらかくフラットな固定板
- 先端封止タイプは横穴2穴
- 個体差により選べる長さ3タイプ
- 適度なコシのスタイレット


(スタイレットは先端封止タイプのみ付属)

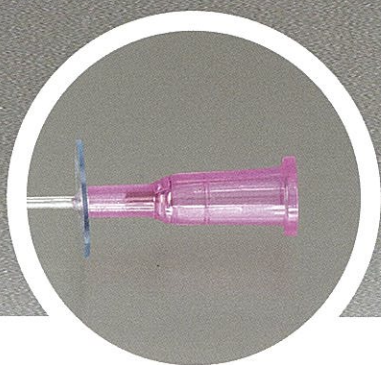

Tierrett 猫カテーテル(固定板付)の特長をご紹介


薄くてやわらかい固定板

やわらかい固定板は、シャフト側がフラットで猫の体にやさしくフィットします

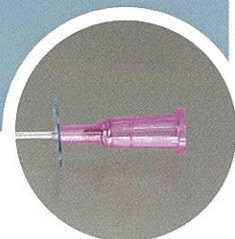特長
1

横穴2穴の先端封止タイプ

フラッシングに適した従来の先端開口タイプに加え、先端封止タイプを新たにラインナップ

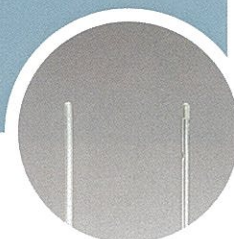特長
2■ 左:先端開口
右:先端封止

猫の個体差にも合わせられる3種類のチューブ長さタイプ

従来の120mmに加えて、80mm、100mmをラインナップしました

特長
3

■ 12種類のラインナップ

LINE UP 〈サイズ構成〉

サイズ呼称	先端形状	有効長	品目コード	JANコード	備考
3Fr固定板付 チューブ外径1.10mm	先端開口	80mm	800-001-4619	4542187202908	先端1穴
		100mm	800-001-4620	4542187202915	
		120mm	800-001-4621	4542187202922	
	先端封止	80mm	800-001-4622	4542187202939	側孔2穴 スタイレット付
		100mm	800-001-4623	4542187202946	
		120mm	800-001-4624	4542187202953	
4Fr固定板付 チューブ外径1.33mm	先端開口	80mm	800-001-4625	4542187202960	先端1穴
		100mm	800-001-4626	4542187202977	
		120mm	800-001-4627	4542187202984	
	先端封止	80mm	800-001-4628	4542187202991	側孔2穴 スタイレット付
		100mm	800-001-4629	4542187203004	
		120mm	800-001-4630	4542187203011	

5本/箱・EOG滅菌済



Tierrett

ウロステント

親水性
ピグテール

ウレタン

動物用医療機器届出番号:28動薬第2111号

猫の"尿管ステントチューブ"
をMade in Japanで"フルラインナップ"

- 症例にあわせて選べる8タイプをラインナップ
- ステント&ダイレーターチューブに親水性コートを付与
- 柔軟でコシのあるポリウレタン



CATHETER




Tierrett ウロステントの特長をご紹介

ステントは柔軟でコシのある
ポリウレタン製チューブ
挿入性に優れた丁寧な仕上げの先端部

特長
1

ステントとダイレーターチューブ
は、親水性コートで優れた挿入性

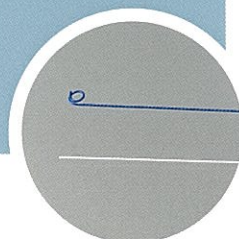特長
2

2.1Fr, 2.5Frのチューブと長さ
から、症例に合わせて選べる8タイプ

特長
3

LINE UP 〈サイズ構成〉						
サイズ呼称	外径	付属品	有効長	品目コード	JANコード	推奨ガイドワイヤー(別売)
2.1Fr 色:グリーン	0.71mm	ダイレーター チューブ 外径:0.73mm	80mm	800-001-4487	4542187201581	Tierrett ガイドワイヤー 0.016"
			100mm	800-001-4488	4542187201598	
			120mm	800-001-4489	4542187201604	
			140mm	800-001-4490	4542187201611	
			160mm	800-001-4491	4542187201628	
2.5Fr 色:ブルー	0.83mm	ダイレーター チューブ 外径:0.86mm	120mm	800-001-4492	4542187201635	Tierrett ガイドワイヤー 0.018"
			140mm	800-001-4493	4542187201642	
			160mm	800-001-4494	4542187201659	



Tierrett

ガイドワイヤー


親水性

Ni-Ti

動物用医療機器届出番号:28動薬第2112号

動物専用設計の"親水性ガイドワイヤー"をお求めやすい価格で
"尿管ステントの留置向け"に開発しました

- 症例にあわせて選べる2サイズをラインナップ
- 親水性コートを付与
- 優れた押し込み特性と柔軟性を兼ね備えたNi-Ti芯線を採用

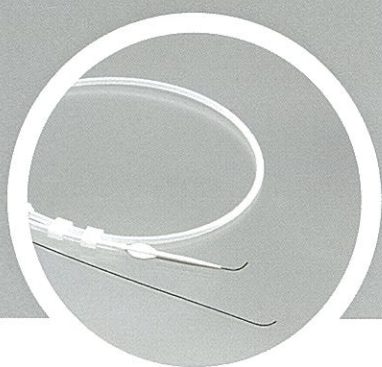

GUIDEWIRE



Tierrett ガイドワイヤーの特長をご紹介します


0.016インチ (2.1Frステント対応)
0.018インチ (2.5Frステント対応)
2サイズをラインナップ

特長
1

優れた押し込み特性と柔軟性を
兼ね備えた
Ni-Ti芯線と親水性コートが挿入性を確保し
ています

特長
2

組織の損傷リスクを低減する
アングルタイプを採用

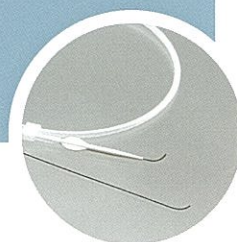特長
3

LINE UP 〈サイズ構成〉

サイズ呼称(インチ)	外径	先端形状	有効長	品目コード	JANコード	対応ステント
0.016"	0.41mm	アングル	600mm	800-001-4718	4542187203899	Tierrett ウロステント 2.1Fr
0.018"	0.46mm	アングル	600mm	800-001-4495	4542187201666	Tierrett ウロステント 2.5Fr

1本/箱・EOG滅菌済



Tierrett

フォーリーカテーテル




シリコーン

動物用医療機器届出番号:28動薬第1077号

"動物専用設計"で先生の使いやすさを追求しました

- 衛生的な使い切りの潤滑ゼリー付
- 3通りの使い方ができるマルチキャップ付
- 付属品付でも価格据え置き
(弊社 小児用カテーテル比較)

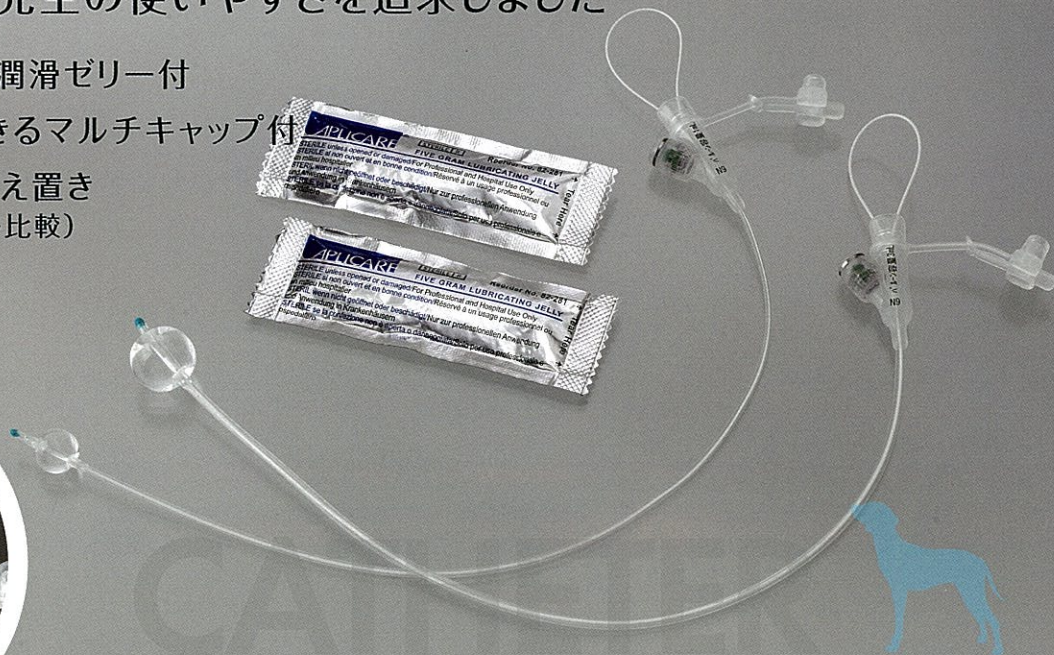

Tierrett フォーリーカテーテルの特長をご紹介します

便利なマルチキャップには、シリンジ
接続機能と止め栓機能があります
カテーテルチップ、ルアーチップ、止め栓と3
つの使い方ができます

特長
1

邪魔にならない軽量コンパクト
な接続部
当社比 重量比約50%長さ比約55%

特長
2

清潔操作可能な使い切り潤滑
ゼリー付

特長
3

■ 材質は、からだに優しいシリコーン製

尿道粘膜への刺激が少なく、尿成分の付着が低減されます

■ 挿入性を向上させる適度なコシのスタイルット付

LINE UP 〈サイズ構成〉

サイズ呼称	外径	バルーン容量	有効長	品目コード	JANコード
6Fr	2.0mm	1mL	300mm	800-001-4611	4542187202823
8Fr	2.7mm	3mL	300mm	800-001-4612	4542187202830

5本/箱・EOG滅菌済



Tierrett

細径フォーリーカテーテル

バルーン

マルチキャップ


シリコーン

動物用医療機器届出番号:28動薬第2048号

"超小型犬"向けに開発

技術を結集し"4.5Fr" シリコーン製バルーンカテーテルを実現


- 超小型犬にもスムーズに挿入できるサイズ
- 衛生的な使い切りの潤滑ゼリー付
- Ni-Ti製 親水性スタイレット付
- 3通りの使い方ができるマルチキャップ付

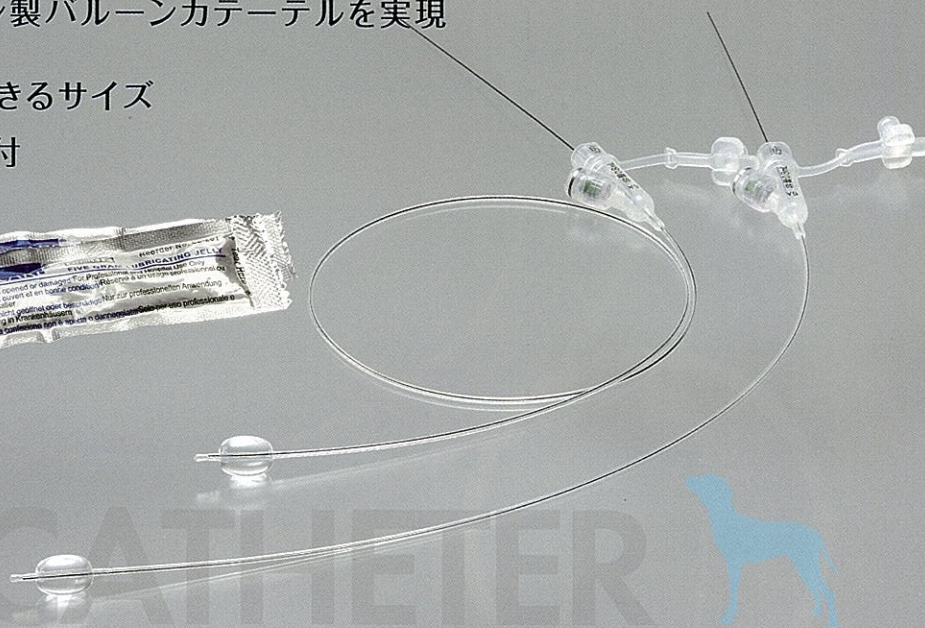

Tierrett 細径フォーリーカテーテルの特長をご紹介

挿入性と抜去性を両立させる
適度なコシの親水性スタイレット
(Ni-Ti芯線) 付

超弾性の性質をもつNi-Ti(ニッケルチタン合金)を芯線に採用し高い挿入性を持たせています。また、外面の親水性コートがスタイレットの抜去をスムーズにします

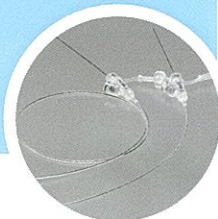特長
1


便利なマルチキャップには、シリンジ
接続機能と止め栓機能があります

カテーテルチップ、ルーアチップ、
止め栓と3つの使い方ができます

特長
2

邪魔にならない軽量・コンパクトな
接続部

当社比 重量比約50%長さ比約55%

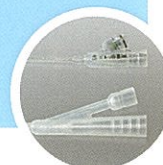特長
3

- 材質は、からだに優しいシリコーン製
尿道粘膜への刺激が少なく、尿成分の付着が低減されます
- 清潔操作可能な使い切り潤滑ゼリー付

LINE UP 〈サイズ構成〉

サイズ呼称	外径	バルーン容量	有効長	品目コード	JANコード
4.5Fr	1.5mm	0.8mL	300mm	800-001-4702	4542187203738
			550mm	800-001-4703	4542187203745
5Fr	1.7mm	0.8mL	300mm	800-001-4704	4542187203752
			550mm	800-001-4705	4542187203769

5本/箱・EOG滅菌済



Tierrett

ロングフォーリーカテーテル


バルーン

シリコーン

動物用医療機器届出番号:26動薬第3980号

"十分なチューブ長さ"のバルーンカテーテル

- からだに優しいシリコーン製
- 軽量・コンパクトな接続部
- 十分なチューブ有効長

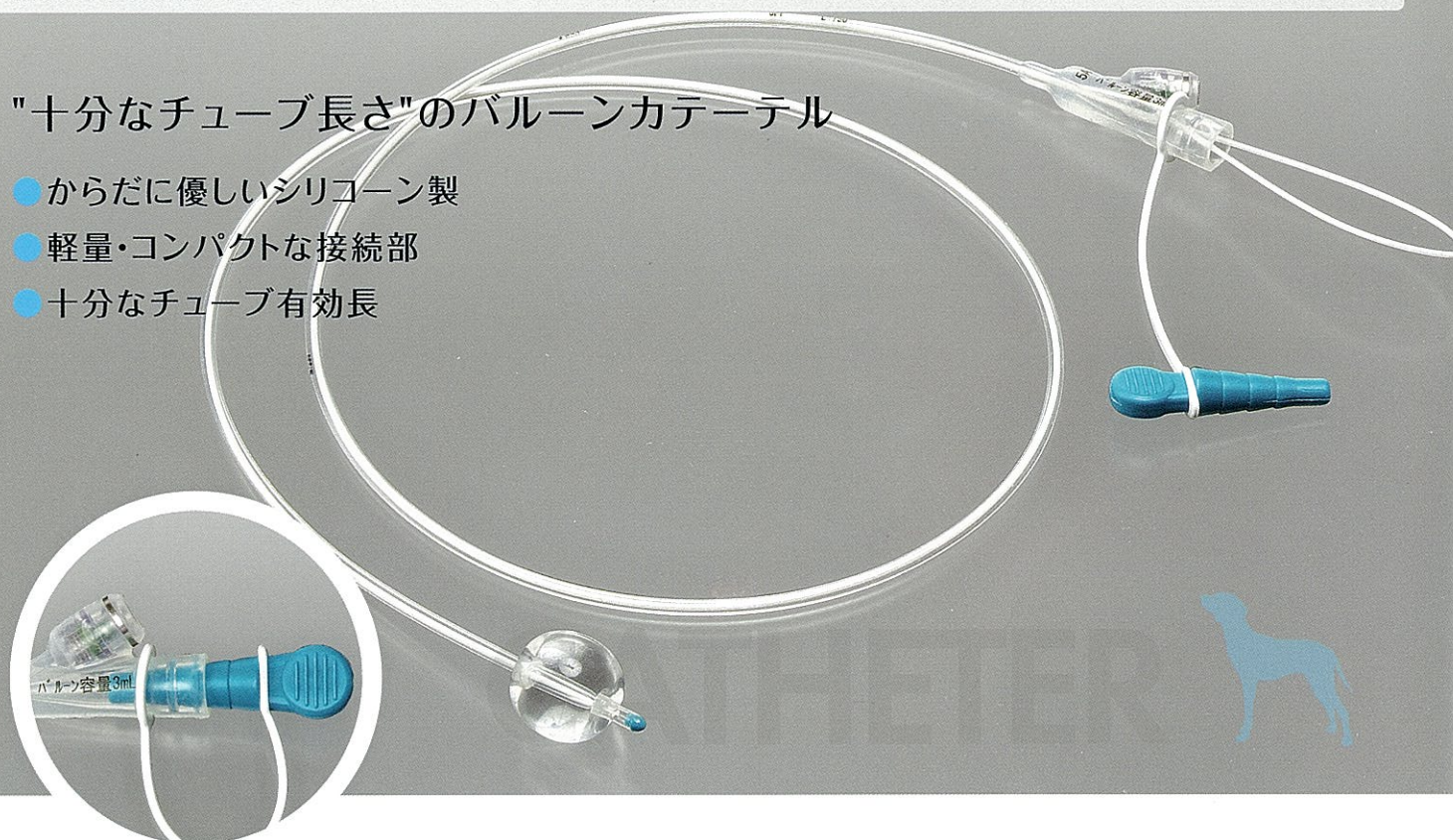

Tierrett ロングフォーリーカテーテルの特長をご紹介

十分なチューブ長さで、
症例にあわせて選べる6タイプ

特長
1

邪魔にならない
軽量・コンパクトな接続部
当社比 重量比約50%長さ比約55%

特長
2

必要に応じて使える止め栓付



特長
3

■ 材質は、からだに優しいシリコーン製

尿道粘膜への刺激が少なく、尿成分の付着が低減されます

■ 挿入性を向上させる適度なコシのスタイレット付

■ 挿入深さがわかる深度マーク付(接続部側200mm)

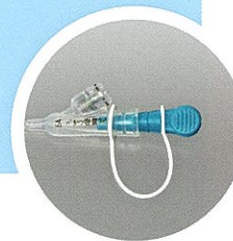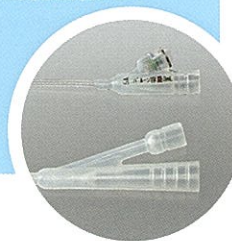


LINE UP 〈サイズ構成〉

サイズ呼称	外径	バルーン容量	有効長	品目コード	JANコード
6Fr	2.0mm	1mL	650mm	800-001-3467	4542187191356
			750mm	800-001-3468	4542187191363
			850mm	800-001-3469	4542187191370
8Fr	2.7mm	3mL	650mm	800-001-3470	4542187191387
			750mm	800-001-3471	4542187191394
			850mm	800-001-3472	4542187191400

5本/箱・EOG滅菌済

Tierrett

クリエートメディックは、
1974年の創業以来、長年培った人用ディスポーザブル医療機器の
開発、生産、品質管理の力を生かし、これからも邁進して参ります。
昨日より今日、そして明日がより良くなるために。
私たちは、ディスポーザブル医療機器を通して、
獣医療現場のご要望を形にしていきます。
それが私たち「ティアレ」の使命です。

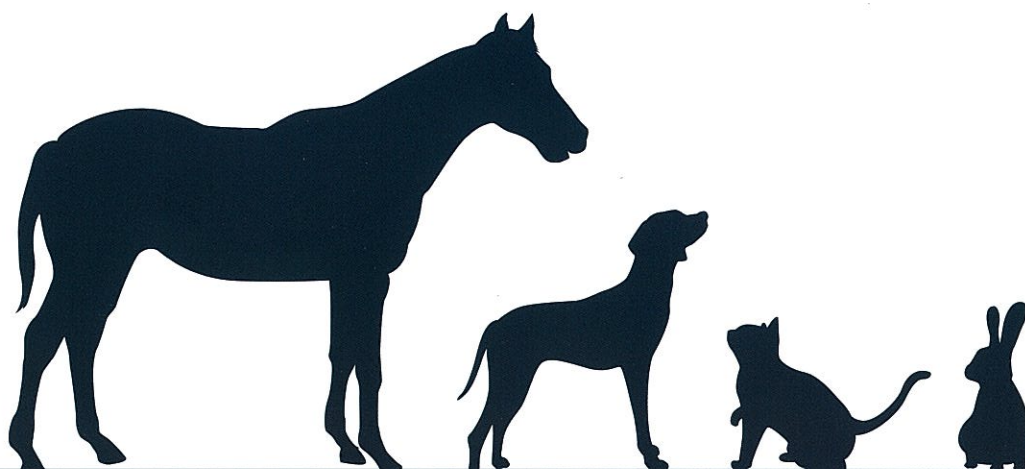

Tierrett†「ティアレ」とは、

病気に苦しむ動物達を助けたいとの思いから、
ドイツ語の“Tierrettung”(動物救護)をモチーフにした、
クリエートメディックの動物医療向け製品のブランド名です。



クリエートメディック株式会社

【本 社】 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-5-25
<http://www.createmedic.co.jp>

【お問い合わせ先】 動物医療推進部

[北海道] [水戸]
TEL(0126)51-1104 TEL(029)243-9411
FAX(0126)51-1105 FAX(029)244-2070
E-mail: oem-infoch@createmedic.co.jp



web



facebook

- ・ 弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。
- ・ ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。